

Дякуємо Вам за вибір манжети для автоматичних тонометрів Австрійської ТМ Longevity. Манжета призначена для застосування на плече, підходить для всіх моделей автоматичних тонометрів ТМ Longevity та більшості інших автоматичних тонометрів (за наявності оригінального перехідника – повітряного штекера). Ми впевнені, що оцінивши високу якість та надійність наших медичних виробів, Ви станете постійним користувачем іншої медичної техніки ТМ Longevity, в асортимент якої входять автоматичні і механічні вимірювачі тиску, електронні термометри, системи вимірювання глюкози у крові, інгалятори, іригатори, прилади для процедур дарсонвалізації.

Ознайомитись з усіма товарами для здоров'я ТМ Longevity Ви можете на сайті: www.longevity.ua



КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ОПИС МАНЖЕТИ НА ПЛЕЧЕ



НАКЛАДЕННЯ МАНЖЕТИ НА ПЛЕЧЕ

1. Манжета не повинна накладатися на рану, оскільки це може призвести до подальших травм.
2. НЕ прикріплюйте манжету до кінцівки, яка використовується для внутрішньовенних інфузій або будь-яких інших внутрішньосудинних процедур. Накачування манжети може тимчасово блокувати кровоток.
3. Манжету не слід накладати на плече з боку мастектомії. У випадку подвійної мастектомії треба використовувати сторону найменш домінуючої руки.
4. Тиск в манжеті може тимчасово спричинити втрату функції одночасно використовуваних пристроїв для моніторингу на одній кінцівці.
5. Стиснутий або перекошений з'єднувальний шланг може призвести до постійного тиску в манжеті через перешкоди виведення повітря з манжети, що може призвести до потенційно небезпечних травм для пацієнта.
6. Не розбирайте манжету. Не намагайтеся ремонтувати самостійно.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



1. З'єднайте манжету з електронним блоком, щільно вставивши штекер повітряної трубки у відповідне гніздо, розташоване на вимірювачі.

 Не намагайтесь вставити штекер повітряної трубки в отвір призначений для додаткового джерела живлення.

2. Надягніть манжету на ліву руку. Край манжети протягніть через металеве кільце і щільно закріпіть за допомогою липучки. Манжета повинна облягати руку щільно, але не перетискати її (між рукою та манжетою повинен вільно поміщатися палець). Повітряна трубка манжети повинна прямувати до долоні по внутрішній стороні плеча

 Вільно чи криво одягнена манжета може бути причиною неправильних показань під час вимірювання артеріального тиску.

3. Нижній край манжети повинен знаходитись вище ліктьового згину приблизно на 1-2 см (0,4-0,8 дюйма). Для досягнення найкращих результатів застосовуйте манжету на оголену руку і тримайте її на рівні серця під час тестування.

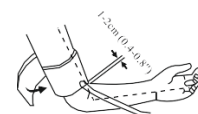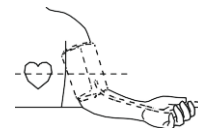

ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Не згинайте манжету сильно та не заламуйте повітряну трубку. Зберігайте її в розгорнутому або акуратно згорнутому вигляді в сухому місці, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів.
2. Тримайте манжету сухою! Протирайте поверхню манжети м'якою, ледь вологою тканиною. Можна замість води використовувати медичний спирт (для дезінфекції). Дайте манжеті висохнути природним шляхом при кімнатній температурі.
3. Не використовуйте бензин або подібні розчинники

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукту	Манжета для автоматичних тонометрів	
Виконання	Розмір 32-48 см	
Окружність манжети	Приблизно 136 mm (мм) (Ш) x 620 mm (мм) (Д) (манжета: підходить для окружності руки 22-40 cm(см))	
Умови при експлуатації	Температура Вологість Тиск	10°C ~ 40°C 15% ~ 93% RH 800 hPa~1060 hPa
Умови зберігання та транспортування	Температура Вологість	-20°C~55°C ≤93% RH
Тип BF	конструкція манжети забезпечує захист від ураження електричним струмом	

ПОЗНАЧЕННЯ І СИМВОЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

	Знак відповідності.		Європейська відповідність		Ознайомлення з інструкцією для застосування
	Виробник		Дата виготовлення		Код партії
	Попередження		Тип електробезпеки «BF»		Температурне обмеження
	Зелена точка		Берегти від вологи		Вторинна переробка

ГАРАНТІЯ

На манжету діє гарантія 1 рік з моменту покупки. У разі виникнення питань щодо експлуатації та працездатності звертайтеся до організації, що здійснює гарантійне обслуговування. Гарантія не поширюється на пошкодження через неправильне поводження із виробом.

Уповноважений представник в Україні (приймає претензії від споживачів) / імпортер: ТОВ «ЮК ДІСТРИБ'ЮШН», 04112 м. Київ, вул. Дорогожицька, 1 тел. (044) 225 20 21.

Гарантійне і сервісне обслуговування: ФОП Мішота Б.П., м. Київ, вул. Гарета Джонса 8, тел.(044)247-67-72

Номер гарячої лінії: 0 800 609 906 (безкоштовні дзвінки з усіх телефонів України)

Альтернативний формат отримання інструкції:

<https://longevity.ua/ua/goods/longevity-manzheta-uvelichennaya-32-48-sm-dlya-avtomaticheskikh-tonometrov-1792422.html>

Строк служби товару: 10 років. Гарантійний строк: 1 рік

Дата останнього перегляду інструкції 10.02.2026

